


SealBio-20

工作站用封膜仪

SealBio-20 封膜仪可使用粘性封板膜、压敏型封板膜和可穿刺铝膜，对符合ANSI和SLAS标准的微孔板进行密封。该设备适用高度8-45 mm范围的微孔板，如深孔板、微孔板和 PCR 板，具有较高的兼容通用性。

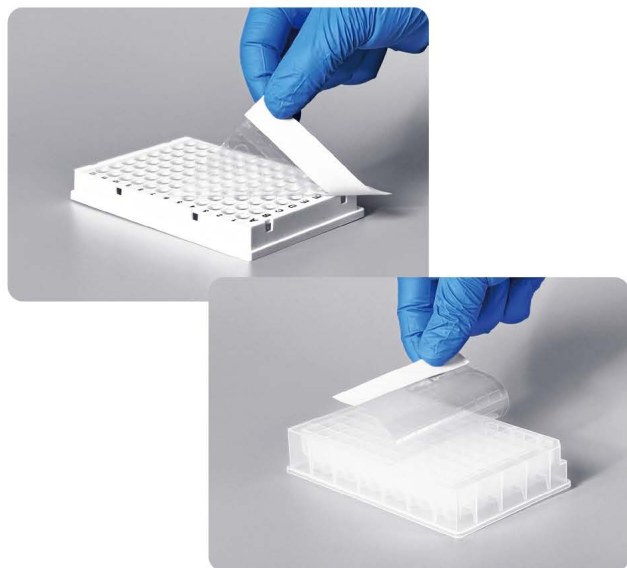

体积小，灵活适配
——可独立或自动化使用

整合使用

适配市面主流液体处理平台，可完成微孔板、密封耗材装卸和封膜等全过程自动化。全程无需人员干预，可提升自动化设备的便利性。

独立使用

单独使用时，通过触屏操作控制设备，仅需手动装卸微孔板及密封耗材，即可完成自动化封膜。



人机友好，操作界面方便快捷

仪器具备自检功能，用户只需轻触按钮，即可对微孔板进行密封操作。



技术参数

型号	SealBio-20
基本尺寸	长450mm，宽114mm，高149mm
封膜方式	压辊式
封膜时间	<30秒/次
适用膜	片状粘性膜；片状压敏膜；可穿刺铝膜
膜存放数量	50张
废料存储	50张
适用耗材	适配高度范围在8-45 mm的ANSI/SLAS 格式微孔板
封膜要求	撕膜侧需预留≥12 mm膜长用于夹膜
膜尺寸规格	128≤总长≤144mm，宽≤90 mm
通讯接口	M12航空插座，6芯
通信方式	CAN通信
操作软件	自带操作系统或PC软件
输入电压	DC24V 1.5 A
最大功率	34 W
重量	6.0 kg

订货信息

订货号	产品描述
AS-15070-00	SealBio-20 工作站用封膜仪
AS-15071-01	片状粘性膜
AS-15071-02	片状压敏膜
AS-15071-03	可穿刺铝膜

杭州奥盛仪器有限公司

HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD.

浙江省杭州市转塘街道浙恒科技园2号楼

公司总机：0571-88802738 产品咨询：0571-88948289 公司传真：0571-87205673

售后服务：0571-81958906 技术支持：0571-87205575

✉ sales.china@allsheng.com marketing@allsheng.com ④ www.allsheng.com.cn

